

Montage Anleitung

REHASHOP Vollgummirampe Gecko


Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen und Hinweise vor der Nutzung Ihrer neuen REHASHOP Vollgummirampe Gecko genau durch.

Wenden Sie sich bei Fragen an unser Team im Kundenservice. Sie erreichen unser Service-Personal in Deutschland unter der kostenlosen Hotline **0800 888 90 80**. Rufen Sie aus Österreich an, nutzen Sie bitte die Nummer **01 212 62 84** sowie für die Schweiz die **0800 88 99 12**.

Wir wünschen Ihnen alles Gute mit Ihrem neuen Produkt!

Ihr rehashop Team

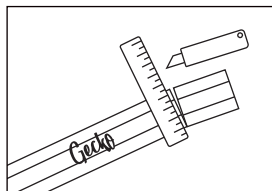

Sie können Ihre Vollgummirampe Gecko mithilfe eines Lineals sowie eines Cuttermessers oder einer Schere bequem auf die passende Länge zuschneiden.

Hinweise:

- Im Lieferumfang enthalten sind die REHASHOP Vollgummirampe Gecko sowie doppelseitiges Klebeband.
- Die REHASHOP Gummirampe Gecko ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Insbesondere im Außenbereich kann es witterungsbedingt mit der Zeit zu Verschleißerscheinungen kommen.
- Nutzen Sie das mitgelieferte Klebeband im Innenbereich. Es ist insbesondere für glatte Oberflächen, wie Parkett oder Linoleum, geeignet.
- Die Rampe verfügt über eine geriffelte Unterseite, sodass diese auf rauen Oberflächen auch ohne Klebeband haftet.
- Bitte ersetzen Sie die Vollgummirampe, wenn die Haftung nicht mehr gegeben ist.
- Nutzung: Messen Sie die Türbreite vor der Nutzung Ihrer neuen Rampe ab. Mit Hilfe eines Lineals und eines Messers, können Sie die passende Länge bequem zuschneiden. Achtung: Passen Sie bei dem Umgang mit spitzen Gegenständen, wie Scheren und Messern, stets auf.
- Reinigung: Die REHASHOP Vollgummirampe Gecko lässt sich mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln säubern.

Montagehandleiding

REHASHOP Massief rubberen hellingbaan Gecko


Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze producten.

Lees de volgende informatie en adviezen nauwkeurig door voordat u uw nieuwe REHASHOP massief rubberen hellingbaan Gecko gebruikt.

Neem bij vragen contact op met onze klantenservice. U kunt de medewerkers in Nederland bereiken op **043 7 999 010**.

We wensen u veel succes met uw nieuwe product!

Uw Rehashop team

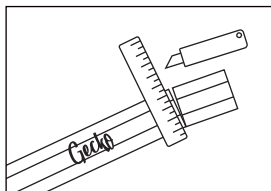

U kunt uw massief rubberen oprijplaat Gecko eenvoudig op de juiste lengte knippen met behulp van een liniaal en een snijmes of schaar.

Opmerkingen:

- De leveringsomvang omvat de REHASHOP massief rubberen hellingbaan Gecko evenals dubbelzijdige tape.
- De REHASHOP rubberen hellingbaan Gecko is zowel geschikt voor binnens- als buitenshuis. Met name buitenshuis kunnen door weersomstandigheden na verloop van tijd slijtageverschijnselen optreden.
- Gebruik de meegeleverde tape binnenshuis. Het is vooral voor gladde oppervlakken, zoals parket of linoleum, geschikt.
- De hellingbaan heeft een geribbelde onderzijde, zodat deze op ruwe oppervlakken zelfs zonder tape blijft plakken.
- Vervang de massief rubberen hellingbaan als de aansprakelijkheid is vervallen.
- Gebruik: meet de deurbreedte op voordat u uw nieuwe hellingbaan gebruikt. Met behulp van een liniaal en een mes, kunt u gemakkelijk de juiste lengte afsnijden.
- Waarschuwing: let altijd goed op met het gebruik van puntige voorwerpen, zoals scharen en messen.
- Reiniging: De REHASHOP massief rubberen hellingbaan Gecko kan met reguliere schoonmaakmiddelen gereinigd worden.

Instruction Manual

REHASHOP solid rubber threshold ramp Gecko


Thank you very much for your confidence in our products.

Please read the following information and instructions carefully before using your new REHASHOP solid rubber threshold ramp Gecko.

If you have any questions, please contact our customer service team. You can reach them free of charge at the number **0800 888 90 80**.

We wish you all the best with your new product!

Your rehashop team

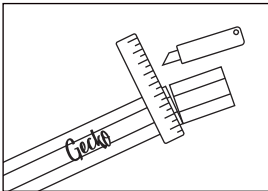

You can easily cut your solid rubber threshold ramp Gecko to the right length using a ruler and a cutter knife or scissors.

Information:

- Included in delivery are the REHASHOP solid rubber threshold ramp Gecko and double-sided adhesive tape.
- The REHASHOP solid rubber threshold ramp Gecko is suitable for indoor and outdoor usage. Outdoor weather conditions can cause wear over time.
- Use the supplied adhesive tape in the interior. It is particularly suitable for smooth surfaces, such as parquet or linoleum.
- The ramp has a ribbed underside. It adheres to rough surfaces even without adhesive tape.
- Please replace the solid rubber threshold ramp if the adhesion is no longer ensured.
- Usage: Measure the door width before using your new ramp. With the help of a ruler and a knife, you can easily cut the appropriate length. Caution: Always be careful when handling sharp objects, such as scissors and knives.
- Cleaning: The REHASHOP solid rubber threshold ramp Gecko can be cleaned with common household cleaning agents.

Instruction

REHASHOP rampe en caoutchouc résistante Gecko

Merci beaucoup pour la confiance que vous nous accordez.

Veillez lire les informations et instructions suivantes avant d'utiliser votre nouvelle rampe en caoutchouc résistante Gecko de chez REHASHOP.

Si vous avez des questions, veuillez contacter nos services clientèle. Vous pouvez nous joindre sur les lignes d'assistance gratuite suivante:

Pour l'Allemagne au numéro **0800 888 90 80**


Pour l'Autriche au numéro **01 212 62 84**

Pour la Suisse au numéro **0800 88 99 12**

Pour la France au numéro **02 77 41 20 96**

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre nouveau produit !

Votre équipe Rehashop

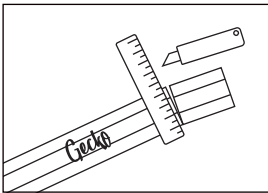

You can easily cut your solid rubber threshold ramp Gecko to the right length using a ruler and a cutter knife or scissors.

Informations:

- La livraison comprend la rampe en caoutchouc résistante ainsi que du ruban adhésif double face.
- La rampe en caoutchouc Gecko de REHASHOP est adaptée pour l'intérieur ou l'extérieur. Dans la zone extérieure, il peut y avoir des signes d'usure au fil du temps en raison des conditions météorologiques.
- Utilisez le ruban adhésif fourni pour l'intérieur, en particulier pour les surfaces lisses comme le parquet ou le linoléum.
- La rampe a une face inférieure striée de sorte qu'elle adhère aux surfaces rugueuses même sans ruban adhésif.
- Veuillez remplacer la rampe en caoutchouc si l'adhérence n'est plus assurée.
- Utilisation : mesurez la largeur de la porte avant d'utiliser votre nouvelle rampe. Aide-vous d'une règle et d'un couteau, ainsi vous pourrez facilement la couper à la bonne longueur. Attention : soyez prudent lorsque vous manipulez des objets tranchants tels que des ciseaux ou des couteaux.
- Le nettoyage : La rampe en caoutchouc Gecko de chez REHASHOP peut être nettoyé avec des produits d'entretien ménager courants.