



Artikel-Nr.: REHA-40000

## Wendiger Begleiter für Ihren Alltag

Unser Elektromobil Siam erinnert aufgrund seiner schlanken und grazilen Optik an die allseits beliebte Siameskatze. Dank seiner schmalen Außenmaße eignet sich der Scooter perfekt für Ihr Zuhause sowie auf Reisen. Seine extrem wendigen Eigenschaften (Wendekreisradius: 53 cm) machen das Manövrieren selbst bei geringem Platzangebot problemlos möglich. Dabei kommt eines definitiv nicht zu kurz: Der Fahrspaß. Nehmen Sie Platz auf dem REHASHOP Elektromobil Siam und freuen Sie sich über Ihren treuen Begleiter, der Ihnen zu mehr Mobilität sowie Eigenständigkeit verhilft. Neben den kompakten Maßen von 102 cm x 50 cm x 86 cm (L x B x H) überzeugt der Siam insbesondere mit der Möglichkeit,

ihn in insgesamt sieben Teilen zu zerlegen. Während der Sitz, beide Armlehnen, die Akkus und Hinter- sowie Vorderrahmen in kürzester Zeit zu demontieren sind, kann die Lenksäule einfach umgeklappt werden. So wiegt das schwerste dieser Einzelteile lediglich 16 kg. Zudem stellt das Gesamtgewicht in Höhe von 42,5 kg inklusive Batterien im Vergleich zu anderen mittelgroßen Elektromobilen ein echtes Leichtgewicht dar.

Die kompakten Maße, die unkomplizierte Demontage sowie das geringe Eigengewicht gewährleisten einen einfachen Transport Ihres neuen Begleiters - selbst in einem kleinen PKW.

### Technische Daten

#### Allgemein

Rahmenfarbe:	Himmelblau, Rot
Federung:	Nein

#### Gewicht

Leergewicht inkl. Akku:	42,5 kg
Max. Benutzergewicht:	136 kg

#### Fahrerlebnis

Max. Geschwindigkeit:	6 km/h
Reichweite:	11 km

#### Abmessungen

Sitzbreite:	42,5 cm
Sitzhöhe:	86 cm
Abmessungen (L x B x H) :	102 x 50 x 86 cm
Ø Vorderräder:	20 cm
Ø Hinterräder:	20 cm

#### Leistung

Akkukapazität:	2 x 12 V / 12 Ah
Motorleistung:	200 W




## Elektrifizierende Mobilität

Ähnlich wie sein tierischer Namensgeber, die Siamkatze, ist unser Elektromobil ebenso als Stubentiger zu betrachten. Aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h, den vergleichsweise kleinen Rädern (Durchmesser 20 cm) sowie einer geringen Reichweite von 11 km\*, ist der Seniorenscooter vorrangig für den Hausgebrauch geeignet. Mit einer Bodenfreiheit von insgesamt 4 cm überwindet der Siam kleinere Hindernisse wie Türschwellen oder Teppiche ohne Probleme. Die Akkukapazität von 2 x 12 V / 12 Ah und die Motorleistung von 200 W sorgen selbst bei einer Maximalbelastung von 136 kg im kleinen Mobilitätsradius für ausgiebigen Fahrspaß. Zahm wie die Siamkatze lässt sich unser E-Scooter angenehm fahren,

wobei er auch zu kleinen Ausflügen im Freien eingesetzt werden kann.



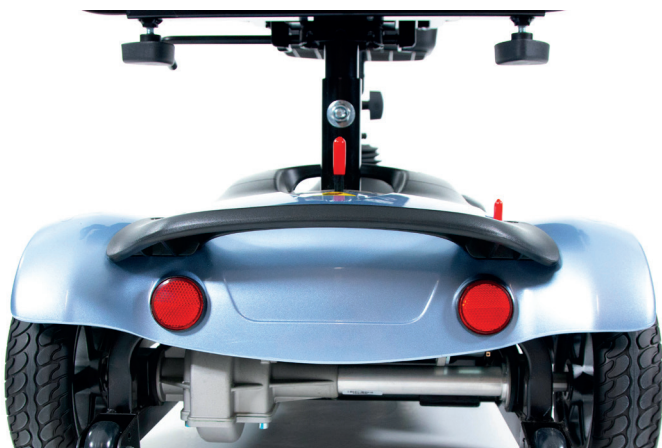



Schließlich stellt dieser einen zuverlässigen Alltagsbegleiter dar, der Sie tatkräftig unterstützt und sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Das spiegelt sich vor allem in seinen zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten wider. Nicht nur die Sitzhöhe lässt sich individuell an Ihre Körpergröße anpassen, auch die Höhe der Armlehnen sowie die Winkel sind beliebig einstellbar. Darüber hinaus bietet die Lenksäule eine weitere Besonderheit. Denn diese lässt sich in der Neigung verstellen, sodass eine komfortable Fahrt garantiert ist.







## Ihre Vorteile im Überblick

-  **Extrem hohe Wendigkeit**  
Mit nur 106 cm ein äußerst geringer Wendekreisradius.
-  **Schnelle und einfache Demontage**  
Unkomplizierte und werkzeuglose Demontage in sieben Einzelteile.
-  **Kompakte Maße**  
Mit 102 cm x 50 cm (L x B) perfekt für den Einsatz bei geringem Platzangebot.
-  **Gute Fahreigenschaften**  
Fahrspaß und einfache Lenkung garantiert; auch bei maximaler Belastung.
-  **Geringes Gewicht**  
Mit nur 42,5 kg Eigengewicht ein echtes Leichtgewicht unter den Elektromobilen.
-  **Anpassungsfähig**  
Vielfältige Verstellmöglichkeiten zur optimalen Anpassung an Fahrerin und Fahrer.

 Video online





## FAQ - Häufig gestellte Fragen

### Warum lohnt sich ein Elektromobil?

Wem es schwerfällt größere Distanzen zu überbrücken, findet in den Elektromobilen einen passenden Begleiter im Alltag. Doch nicht nur im Außen- sondern auch im Innenbereich zeigen die elektrischen Hilfsmittel ihre Stärken. So auch der Siam, der für die Nutzung in den eigenen vier Wänden sowie auf Reisen konzipiert wurde. Komfortable Eigenschaften, wie ein geringer Wenderadius, sorgen für mehr Mobilität und Sicherheit, während die Handhabung so einfach wie möglich gehalten ist.

Das bezieht sich sowohl auf die Lenkung als auch auf die Flexibilität des Hilfsmittels. Denn insbesondere Modelle für den Innenbereich lassen sich auch bei einem geringen Platzangebot bequem steuern, um Ihnen die flexible Bewegung im Haus zu ermöglichen. Für eine optimale Unterstützung, lassen sich die Einstellungen des Hilfsmittels an die persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen.

### Wie schnell fährt das Elektromobil?

Mit dem REHASHOP Elektromobil Siam können Sie bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von 6 km/h beschleunigen. Das ermöglicht ein gemäßigtes und sicheres Vorankommen. Aufgrund seiner Reichweite von 11 km, ist der Siam für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Jedoch kann das E-Mobil auch für kleinere Distanzen im Außenbereich genutzt werden. Seine wahren Stärken entfaltet unsere mobilisierte Hauskatze jedoch in der Wohnung, in dem sie für mehr Selbstständigkeit sorgt.

### Elektromobil oder Elektrorollstuhl?

Ein Elektrorollstuhl bietet sich insbesondere für diejenigen an, die dauerhaft auf eine Mobilitätshilfe angewiesen sind. Das Elektromobil hingegen bedingt im Gegensatz hierzu gewisse physische Voraussetzungen. Hierzu zählt unter anderem das Lenken mit Hilfe der Lenksäule und das Beschleunigen sowie Bremsen über die Fahrwippe. Elektromobile unterstützen ihre Nutzer als aktiver Begleiter im Alltag, sind im Falle einer Gehunfähigkeit jedoch ein weniger optimales Hilfsmittel. Dafür versprechen sie Mobilität und Unabhängigkeit, wenn es um das Zurücklegen von Distanzen geht – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

### Wo darf man mit einem Elektromobil fahren?

Auch, wenn das REHASHOP Elektromobil Siam mit seiner Wendigkeit insbesondere für den Innenbereich ausgelegt ist, kann es grundsätzlich auch für kurze Distanzen im Außenbereich genutzt werden. Bei Ausflügen sollte sie jedoch die maximale Distanz sowie die Fahreigenschaften und die Bodenfreiheit beachten. Für den Siam sind barrierefreie Wege, die über eine glatte Fahrbahn mit wenig Steigung verfügen, am besten geeignet. Fahren darf das wendige E-Mobil da, wo auch Fußgänger unterwegs sind.



### REHASHOP Leichtgewichtrollstuhl Zebra

Artikel-Nr.: KREHA-2070-46

- Reisetauglicher Begleiter mit cleverem Faltmechanismus
- Schlankes Design mit nur 14 kg Eigengewicht
- 41, 46 oder 51: Drei verschiedene Sitzbreiten sorgen für Fahrkomfort

 Video online

#### Technische Daten

Sitzbreite:	41 / 46 / 51 cm
Sitzhöhe:	54 cm
Sitztiefe:	39 cm
Bremse für BP:	ja
Gewicht:	14 kg
Belastbar bis:	110 kg

### REHASHOP Elektrorollstuhl E-Tiger

Artikel-Nr.: KREHA-2500-43

- Faltbarer Elektrorollstuhl mit sportlich-moderner Optik
- Angenehmes Sitzpolster und verschiedene Einstellungsoptionen
- Kann auch manuell bewegt werden

#### Technische Daten

Sitzbreite:	43 cm
Sitzhöhe:	53 cm
Reichweite:	20 km
Batteriekapazität:	24V/15,6Ah
Motorleistung:	130 W
Belastbar bis:	120 kg



### REHASHOP Elektrorollstuhl Karakal

Artikel-Nr.: KREHA-2010

- Smarter Elektrorollstuhl zu top-Konditionen
- Mit Reichweiten bis zu 15 km perfekt für das nähere Wohnumfeld
- In nur wenigen Handgriffen flexibel zusammenklappbar

 Video online

#### Technische Daten

Sitzbreite:	43 cm
Sitzhöhe:	52 cm
Reichweite:	15 km
Batteriekapazität:	24 V / 20 Ah
Motorleistung:	2 x 200 W
Belastbar bis:	120 kg

Entdecken Sie unsere aktuellen Bestpreise online oder nutzen Sie einfach unsere kostenfreie Hotline